

シート No.

AQF FO 027 食品・飼料

減塩醤油 & 醤油中の塩素分析

1/2

対応機種 : AQF-2100H System ,HF-210,GA-210,ABC-210/ASC-240S

検出方法 : イオンクロマトグラフ法

関連規格 :

試料を安全に燃焼する自動試料燃焼装置 AQF-2100H とイオンクロマトグラフを組み合わせた燃焼イオンクロマトグラフィー (CIC) システムを用いると、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、硫黄などの濃度を迅速、且つ正確に測定することができます。

試料名	減塩醤油 & 醤油
試料形状	
分析項目	塩素 (Cl)
分析方法	試料を Ar キャリアー中で熱分解後、O ₂ で燃焼します。試料中のハロゲンはハロゲン化水素及びハロゲンガスとなり、硫黄は硫黄酸化物となります。これらの成分を吸収液に捕集し、ハロゲン化物イオンや硫酸イオンにします。この吸収液をイオンクロマトグラフに自動注入し分析します。 分析フロー 【試料秤量】⇒【燃焼】⇒【燃焼ガス捕集】⇒【IC 分析】
測定条件	1.AQF-2100H 試料採取量 : 10mg~20mg 試料ボート : 磁性ボート 添加剤 : WO ₃ 100mg 反応管 : 石英管 (石英綿充填) 吸収液 : 過酸化水素水溶液 モード : HF-210 ヒーター温度 Inlet : 1000℃ Outlet : 1100℃ ガス流量 Ar : 200 ml/min O ₂ : 400 ml/min GA-210 吸収液量 : 10~20ml 計量管 : 20 μl 吸収管サイズ : 10 ml 用 送水目盛 : 4 加湿用 Ar 流量 : 100 ml/min

シート No.

AQF FO 027 減塩醤油 & 醤油中の塩素分析


2 / 2

2.イオンクロマト

イオンクロマトグラフ : DIONEX ICS-1500
 カラム : DIONEX Ion Pack AG12A / Ion Pack AS12A
 溶離液 : 2.7mM Na₂CO₃ / 0.3mM NaHCO₃
 溶離液流量 : 1.50ml / min
 検出器 : 電気伝導度
 サプレッサー : ASRS-4-mm
 測定時間 : 30min
 導入量 : 20 μl (GA-210 の計量管より導入)
 検量線 : F Cl Br S:5ppm ~ 40ppm

分析結果

クロマトグラム

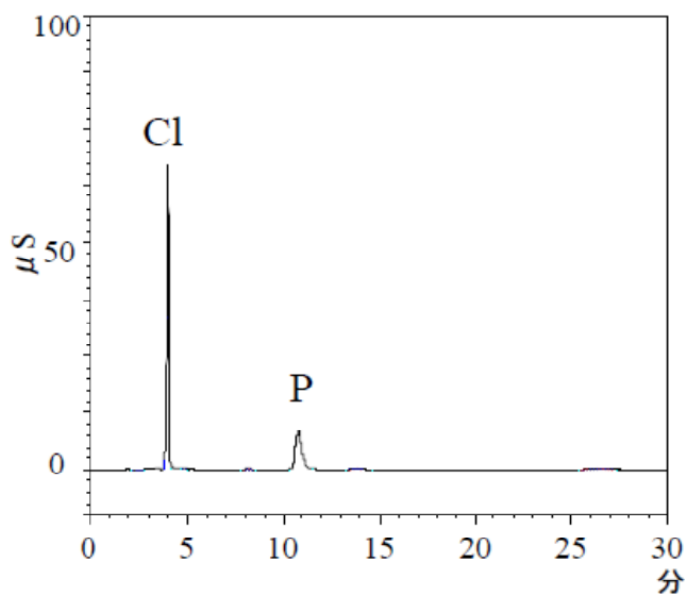

測定値

	試料量 (mg)	Cl (%)
減塩醤油	10	4.3
醤油	20	10.5

コメント

- ・薬品類の取り扱い: 薬品のラベル表示や安全データシートを確認し、充分注意してください。
- ・オートポートサンプルチェンジャーASC-240S を利用して自動化が可能です。
- ・ASC-240S 使用の場合、ポートはセラミックスポートになります。

※本シートはご参考として提供するものであり、分析値を保証するものではありません。

分析環境などによ外的要因や試料の性状を考慮し、最適条件でご使用ください。

AQF2100H_11_011