

シート No.

AQF MR 021 無機

石炭認証物質中の塩素, 臭素分析

1/2

対応機種 : AQF-2100H System , HF-210, GA-210, ABC-210/ASC-240S

検出方法 : イオンクロマトグラフ法

関連規格 :

環境への配慮からハロゲンの含有量を知ることがとても重要です。試料を安全に燃焼する自動試料燃焼装置 AQF-2100H とイオンクロマトグラフを組み合わせた燃焼イオンクロマトグラフィ(CIC)システムを用いると、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、硫黄などの濃度を迅速、且つ正確に測定することができます。

試料名	BCR-182 -Steam coal
試料形状	
分析項目	塩素(Cl) 臭素(Br)
分析方法	試料を Ar キャリアー中で熱分解後、O ₂ で燃焼します。試料中のハロゲンはハロゲン化水素及びハロゲンガスとなり、硫黄は硫酸化物となります。これらの成分を吸収液に捕集し、ハロゲン化物イオンや硫酸イオンにします。この吸収液をイオンクロマトグラフに自動注入し分析します。 分析フロー 【試料秤量】⇒【燃焼】⇒【燃焼ガス捕集】⇒【IC 分析】
測定条件	1.AQF-2100H 試料採取量 : 30mg 試料ポート : 磁性ポート 添加剤 : 有 (WO ₃ 100mg) 反応管 : 石英管 (石英綿充填) 吸収液 : 過酸化水素水溶液 モード : 定容法 HF-210 ヒーター温度 Inlet : 900℃ Outlet : 1000℃ ガス流量 Ar : 200ml/min O ₂ : 400ml/min GA-210 吸収液量 : 10ml 計量管 : 100 μ l 吸接管サイズ : 10ml 用 送水目盛 : 2 加湿用 Ar 流量 : 100ml/min ABC-210/ASC-240S

シート No.

AQF MR 021 石炭認証物質中の塩素, 臭素分析


2/2

2.イオンクロマト

イオンクロマトグラフ : DIONEX ICS-1500
 カラム : DIONEX Ion Pack AG12A / Ion Pack AS12A
 溶離液 : 2.7mM Na₂CO₃ / 0.3mM NaHCO₃
 溶離液流量 : 1.50ml / min
 検出器 : 電気伝導度
 サプレッサー : ASRS-4-mm
 測定時間 : 30min
 導入量 : 100 μl (GA-210 の計量管より導入)
 検量線 : F Cl Br S : 0.1ppm ~ 5.0ppm

分析結果

クロマトグラム

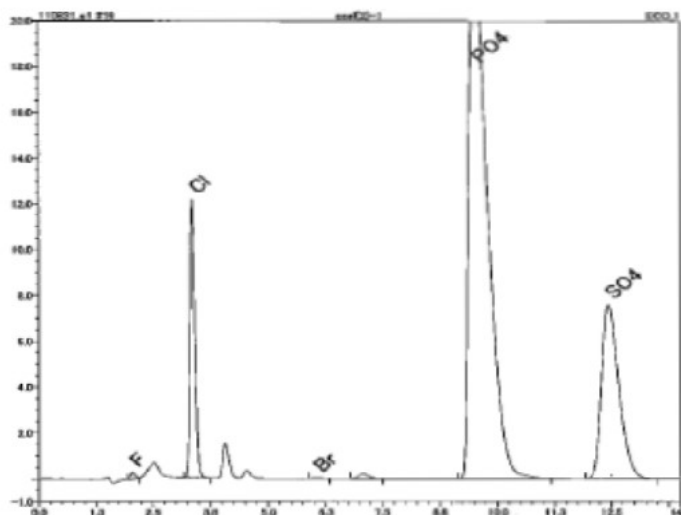

測定値

	Measurement	
	Cl(mg/kg)	Br(mg/kg)
CERTIFY	3700 ± 70	36.5
1	3624	34.7
2	3636	37.4
3	3659	36.5
Avg.	3640	36.2
RSD(%)	0.49	3.82

コメント

- ・薬品類の取り扱い: 薬品のラベル表示や安全データシートを確認し、充分注意してください。
- ・オートボートサンプルチェンジャーASC-240S を利用して自動化が可能です。
- ・ASC-240S 使用の場合、ボートはセラミックスポートになります。

※本シートはご参考として提供するものであり、分析値を保証するものではありません。

分析環境などによる外的要因や試料の性状を考慮し、最適条件でご使用ください。

AQF2100H_11_004